

WILLI GELLER
Creation
SIMPLY BRILLIANT

Creopal Dientes protésicos



Línea exclusiva de dientes de composite: juego de colores y formas lleno de matices

Alto nivel de estética, estabilidad y eficiencia: Creopal es un moderno sistema dental de composite con una resistencia aumentada, nacido del intercambio intercultural de técnicos dentales asiáticos y europeos. De este modo se concibieron la gnatología y la textura de la superficie de los dientes anteriores en un proyecto de varios años del maestro ceramista Willi Geller, mientras Yasuhiro Odanaka, entre otros, desarrollaba paralelamente los dientes posteriores.

Las diez formas dentales frontales y las cinco laterales para los maxilares superior e inferior se ajustan perfectamente entre sí. Destacan, sobre todo, por la naturalidad de su morfología y de su textura superficial así como por su extraordinario brillo. Gracias a la fracción equilibrada de relleno se incrementa la elevada resistencia a la abrasión y la seguridad de los dientes artificiales altamente compactos.

Espesor mínimo, máxima expresión

La exclusiva línea de dientes protésicos también incluye facetas de composite multifuncionales para las regiones anterior y posterior. Estas "Creopal-Shells" alcanzan, a pesar de su

extremada delgadez, el mismo efecto de color y el mismo brillo que los dientes totalmente anatómicos, es decir, ¡extraordinariamente real!

Individualmente adaptable y para múltiples indicaciones:

el sistema Creopal se presenta en 16 colores de dientes Vita® y en 2 colores de dientes Bleach para una adaptación óptima del color con materiales plásticos y cerámicos, las Creopal-Shells se presentan en una paleta de colores reducida. Los dientes protésicos fabricados en un proceso de cuatro capas y los Creopal-Shells (proceso de dos capas) son adecuados tanto para protésica parcial, combinada y de implantes como para protésica total, y los Set-up o Mock-up para restauraciones estéticas y Backward Planning (planificación regresiva). Las formas dentales de diseño ligeramente rectangular son ideales para personalizar y combinar, sin que quede mermada su estética.

Dientes y Shells Creopal: ¡económicos y estéticos hasta en el más mínimo detalle!

WILLI GELLER
Creopal – Para facilitarle las cosas y para hacer más felices a sus pacientes ...



... un equipo asiático-europeo ha creado la combinación perfecta de dientes protésicos y de carillas/
revestimientos perfectamente adaptados a ellos, utilizando los materiales High-Tech más innovadores:
composites acrílicos más adhesivos.

La singularidad universal convierte a este producto en el „NÚMERO UNO“ .









Disfrute del „NÚMERO UNO“ .

WILLI GELLER *Creopal* SHELL | FULLCONTOUR



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE CREOPAL Y CREOPAL SHELL:

- Dientes protésicos y carillas de revestimiento de composite independientes del sistema y naturales.
- Formas dentales de una elevada opalescencia y fluorescencia para un mayor efecto lumínico.
- Las formas básicas rectangulares se pueden personalizar fácilmente y sin pérdida de color.
- Espacios interdientales cerrados para una colocación y configuración papilar naturales.
- Forma, color y brillo idénticos en dientes de estratos múltiples y facetas.
- Indicaciones generales para prótesis parciales y totales y para restauraciones provisionales.

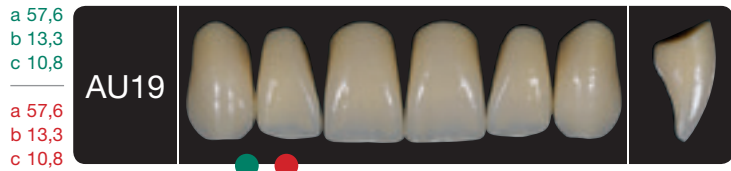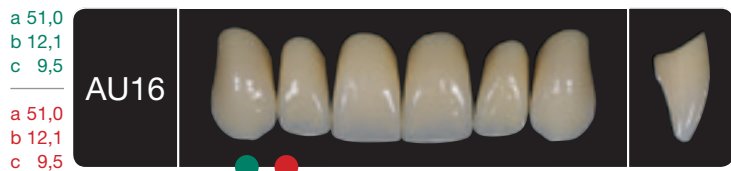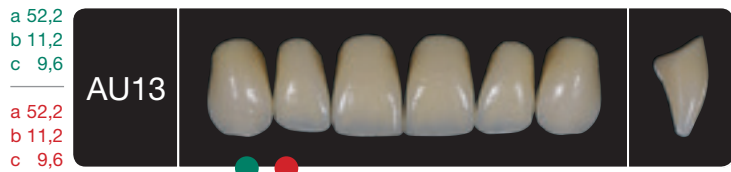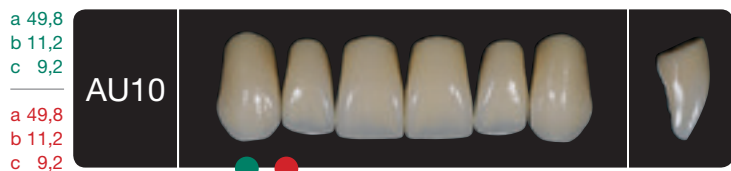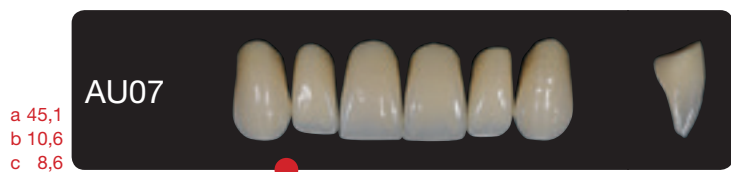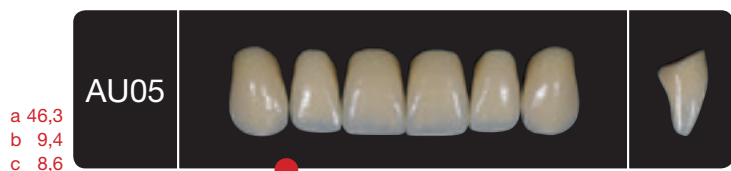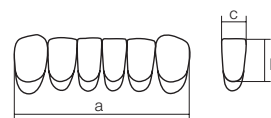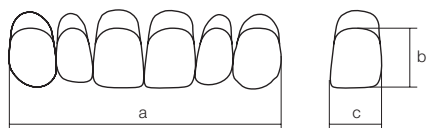

Tipo AU

Dientes anteriores superiores

Tipo AL

Dientes anteriores inferiores


• Creopal – shell

• Creopal – full contour



07
PU-PL

a 28,0
b 29,0
c 9,9
d 9,3

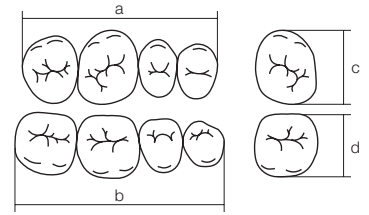


Relación de contacto en situación estática

Intercuspidadación plana

Calota: 140


Gracias a la forma anatómica y a la inclinación de la cúspide es posible aplicar la técnica combinada y protésica total sin problema alguno.

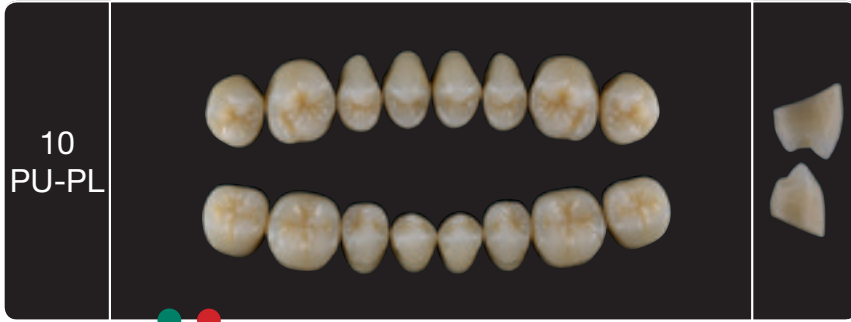

10
PU-PL

a 30,0
b 31,1
c 10,6
d 10,0


a 30,0
b 31,1
c 10,6
d 10,0

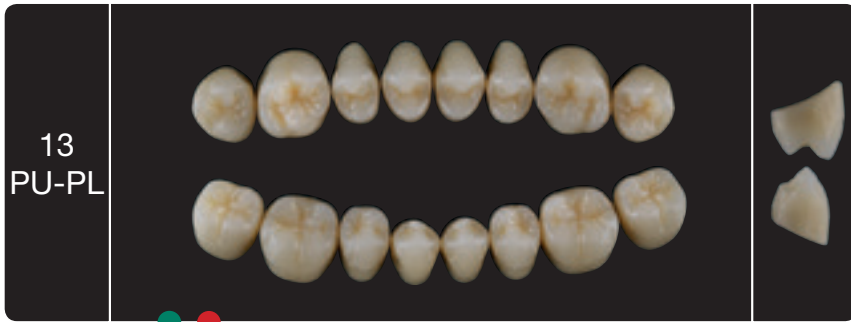

13
PU-PL

a 32,0
b 33,2
c 11,3
d 10,7


a 32,0
b 33,2
c 11,3
d 10,7

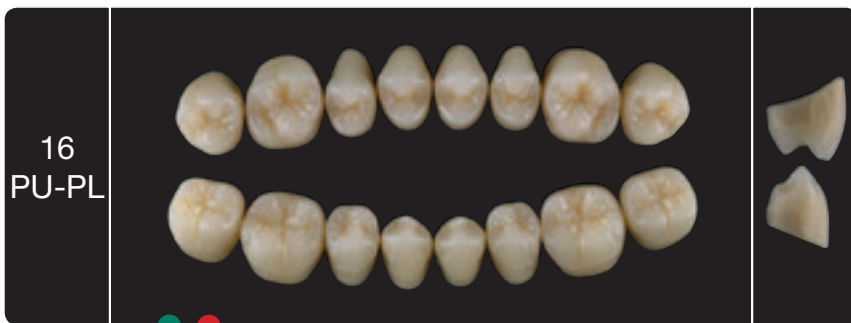

16
PU-PL

a 34,0
b 35,3
c 12,1
d 11,3

a 34,0
b 35,3
c 12,1
d 11,3

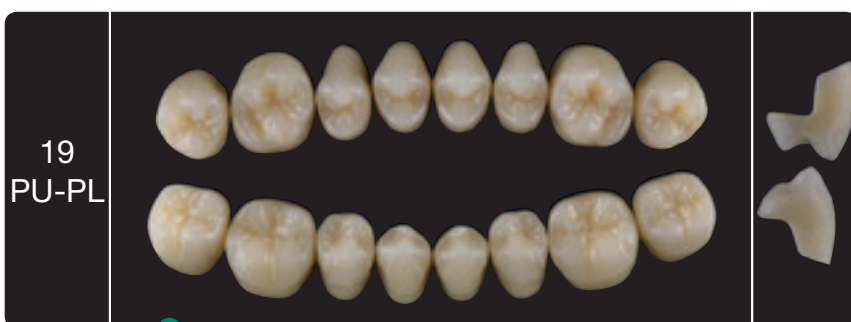


19
PU-PL

a 36,5
b 39,4
c 12,2
d 12,1

CREOPAL: SHELL Y FULL CONTOUR

shell anterior	X	X	X	X	-		X	X	X	-		-	-	-	-		-	-	-	-	X
shell posterior	X	X	X	X	-		X	X	X	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
full anterior	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
full posterior	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	-	-



Ventajas de Creopal y Creopal Shell:

- La técnica de cuádruple capa posibilita la construcción de un diente artificial idéntico al natural.
- La técnica de doble capa con una elevada opacidad garantiza un aspecto natural de las facetas de composite.
- Profundidad de colorido dinámico gracias a los núcleos de dentina altamente cromáticos con estructuras de mamelones conformadas individualmente, y a las masas incisales opalescentes.
- Mayor proporción incisal para una caracterización o variación de la forma sin pérdida de color.
- Los espacios interdientales permiten personalizar la colocación y facilitan la configuración gingival natural.
- Conductividad lumínica brillante gracias a la opalescencia, fluorescencia y translucidez naturales.
- La especial morfología de la superficie ofrece una refracción lumínica natural.
- Estética elevada gracias a la estructura expresiva; variedad de formas reducida y ampliable por individualización (¡pocas existencias en almacén!).
- Elevada capacidad de adhesión al material protésico de base.
- Ausencia de depósitos de placa gracias a su superficie homogénea.
- Sin desgaste de los antagonistas naturales.

Principios de colocación:

- Para todos los métodos de montaje habituales según los principios de la guía mecánica del diente y de la articulación.
- Colocación diente a diente o diente a dos dientes.
- Oclusión equilibrada.

Indicaciones de Creopal y Creopal Shell:

Planificación y piezas provisionales

- Set-up para Backward Planning (planificación regresiva) para restauraciones complejas
- Mock-up para piezas provisionales a corto plazo
- Piezas provisionales a largo plazo (coronas individuales y puentes)
- Fundas

Técnica de combinación

- Trabajos telescópicos
- Restauraciones sobre barras
- Trabajos de implante
- Prótesis parciales

Prótesis completa

WILLI GELLER
Creation
SIMPLY BRILLIANT

Distribuidor

Creation Willi Geller International GmbH
Koblacherstraße 3, 6812 Meiningen, Austria
Tel. +43 (0)5522 76784, Fax. +43 (0)5522 76784-59
info@creation-willigeller.com, www.creation-willigeller.com

Fabricante

KLEMA Dentalprodukte GmbH
Koblacherstr. 3a, 6812 Meiningen, Austria

